

HYLOVIS® GEL MULTI

POUR UNE LUBRIFICATION DURABLE DES YEUX

Mode d'emploi

HYLOVIS® GEL MULTI

Hyaluronate de sodium obtenu par fermentation 0,3 %. Hydrogel transparent d'hyaluronate de sodium naturel hautement purifié. Sans protéine animale. Stérile, sans conservateur.

Composition : 1 ml de solution au pH neutre contient 3,0 mg d'hyaluronate de sodium, du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, du phosphate disodique, du citrate de sodium, du chlorure de magnésium, du chlorure de calcium et de l'eau purifiée. La solution est hypotonique.

Indications : Sensations modérées et sévères de la sécheresse oculaire.

Contre-indications : Hypersensibilité individuelle à l'un des composants du produit.

Précautions : Ne pas toucher l'embout du flacon ouvert et ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout. Remplacer le capuchon de protection de HYLOVIS® GEL MULTI après usage. HYLOVIS® GEL MULTI peut être utilisé jusqu'à 6 mois après la première utilisation. Toute solution non utilisée dans les 6 mois suivant l'ouverture doit être jetée. Dans le cas contraire, la stérilité n'est plus garantie et ceci peut être associé à un risque d'infection. Ne pas utiliser HYLOVIS® GEL MULTI si l'emballage est endommagé. Si les troubles persistent pendant l'utilisation de HYLOVIS® GEL MULTI, consulter un médecin.

Interactions : Ne pas utiliser HYLOVIS® GEL MULTI en même temps que d'autres médicaments ou produits ophtalmiques, car cela pourrait en modifier les effets. Attendre au moins 15 minutes avant d'instiller d'autres produits ophtalmiques.

Effets indésirables : Dans de très rares cas (moins de 1 cas pour 10 000 patients), des troubles transitoires peuvent survenir, tels qu'une irritation de la conjonctive, une sensation de corps étranger, une douleur, une rougeur ou une sensation de brûlure dans l'œil ou une vision momentanément trouble.

Déclaration des effets indésirables : Tout incident grave survenant en lien avec le dispositif doit être déclaré au fabricant TRB CHEMEDICA AG et à l'autorité compétente locale de l'utilisateur.

Posologie et administration : Enlever la bague d'inviolabilité avant la première administration. Retirer le capuchon de protection. Incliner la tête vers l'arrière et positionner l'embout du flacon au-dessus de l'œil à traiter. Tirer la paupière inférieure vers le bas avec l'index d'une main. Presser le flacon et une goutte de HYLOVIS® GEL MULTI sera libérée (voir illustrations). Sauf recommandation contraire, instiller 1 ou 2 gouttes de HYLOVIS® GEL MULTI dans l'œil aussi souvent que nécessaire. Après quelques clignements des paupières, la solution se répartit sur la surface oculaire en formant un

film transparent et durable. **HYLOVIS® GEL MULTI peut également être utilisé pendant le port de lentilles de contact (rigides ou souples).**

Caractéristiques et mode d'action : HYLOVIS® GEL MULTI contient du hyaluronate de sodium, un polymère naturel également présent dans les structures de l'œil humain. Les caractéristiques physiques particulières du hyaluronate de sodium confèrent à HYLOVIS® GEL MULTI ses propriétés viscoélastiques et de rétention d'eau. HYLOVIS® GEL MULTI forme ainsi un film protecteur stable à la surface de l'œil qui n'est que lentement éliminé par le battement des paupières. HYLOVIS® GEL MULTI allie ainsi un soulagement durable à un confort maximal. HYLOVIS® GEL MULTI est bien toléré grâce à sa composition unique.

Conservation et élimination : Conserver à une température inférieure à 30 °C dans un endroit sec, à l'abri de la lumière ! Ne pas congeler ! Ne pas utiliser HYLOVIS® GEL MULTI après la date d'expiration indiquée sur le flacon et le carton d'emballage. Conserver hors de portée des enfants ! Jeter 6 mois après ouverture, sans dépasser la date de péremption, conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.

Présentation : 15 ml de solution en flacon multidose.

HYLOVIS® GEL MULTI est un dispositif médical destiné à être utilisé par les patients.

Date de la dernière révision : 2025-02

Mode d'emploi au verso.




Distributeur :
TRB CHEMEDICA SAS
ArchParc, ActiTech 4
60 Avenue Marie Curie
CS 40218
74160 Archamps, France
Tél.: +33 (0) 4 50 95 09 00
www.trbchemedica.fr
Code ACL : 4028694001437

TRB CHEMEDICA AG
Otto-Lilienthal-Ring 26
85622 Feldkirchen (Munich), Allemagne
Tél. +49 (0)89 46 14 83-0




HYLOVIS®


GEL MULTI

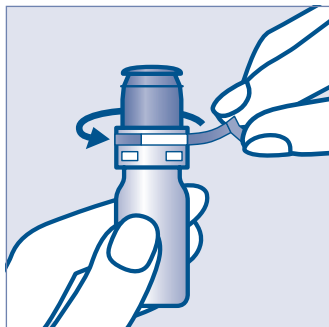


1
Enlever la bague
d'inviolabilité.

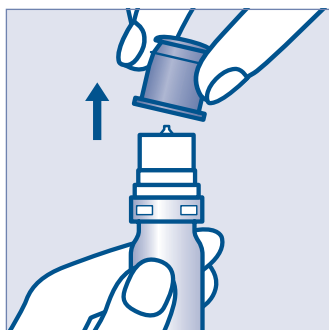

2
Retirer le capuchon
de protection.

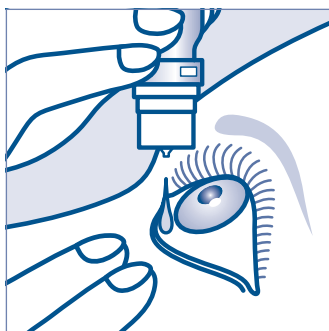

3
Instiller une ou deux
gouttes dans l'œil.

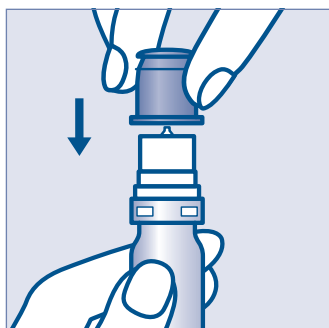

4
Remettre le capuchon
de protection en place
après administration.



Numéro de lot



Date de péremption



Fabricant



Dispositif médical



Numéro d'identification
unique du dispositif



Consulter le
mode d'emploi



Stérilisé par
procédé aseptique



Limite de température



Conserver à l'abri
de la lumière



Date de fabrication

120283/1
NOT42602V01
S/03.25