

## LUBRIFIANT OCULAIRE

### Mode d'emploi

#### HYLOVIS®

Hyaluronate de sodium obtenu par fermentation 0,18 %. Solution transparente d'hyaluronate de sodium naturel hautement purifié. Sans protéine animale. Stérile, sans conservateur.

**Composition :** 1 ml de solution à pH neutre contient 1,8 mg d'hyaluronate de sodium, du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, du phosphate disodique, du citrate de sodium, du chlorure de magnésium, du chlorure de calcium et de l'eau pour préparations injectables. La solution est hypotonique.

**Indications :** Sensations modérées et sévères de sécheresse oculaire.

**Contre-indications :** Hypersensibilité individuelle à l'un des composants du produit.

**Précautions :** Ne pas toucher l'embout du récipient ouvert et ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout. Toute solution non utilisée immédiatement après ouverture doit être jetée. Dans le cas contraire, la stérilité n'est plus garantie et ceci peut être associé à un risque d'infection. Ne pas utiliser HYLOVIS® si l'emballage est endommagé. Si les troubles persistent pendant l'utilisation de HYLOVIS®, consulter un médecin.


**Interactions :** Ne pas utiliser HYLOVIS® en même temps que d'autres médicaments ou produits ophtalmiques, car cela pourrait en modifier les effets. Attendre au moins 15 minutes avant d'instiller d'autres produits ophtalmiques.

**Effets indésirables :** Dans de très rares cas (moins de 1 cas pour 10 000 patients), des troubles transitoires peuvent survenir, tels qu'une irritation de la conjonctive, une sensation de corps étranger, une douleur, une rougeur ou une sensation de brûlure dans l'œil ou une vision momentanément trouble.


**Déclaration des effets indésirables :** Tout incident grave survenant en lien avec le dispositif doit être déclaré au fabricant TRB CHEMEDICA AG et à l'autorité compétente locale de l'utilisateur.

**Posologie et administration :** Se laver soigneusement les mains avant d'utiliser HYLOVIS®. Tourner et détacher le capuchon. Incliner la tête vers l'arrière et positionner l'embout du récipient au-dessus de l'œil à traiter. Tirer la paupière inférieure vers le bas avec l'index d'une main. Presser le récipient et une goutte de HYLOVIS® sera libérée (voir illustrations).


Sauf recommandation contraire, instiller 1 ou 2 gouttes de HYLOVIS® dans l'œil aussi souvent que nécessaire. Après quelques clignements des paupières, la solution se répartit sur la surface oculaire en formant un film transparent et durable. **HYLOVIS® peut également être utilisé pendant le port de lentilles de contact (rigides ou souples).**

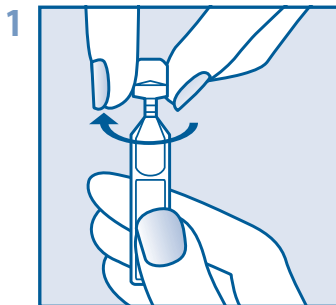

Tourner et détacher le capuchon.

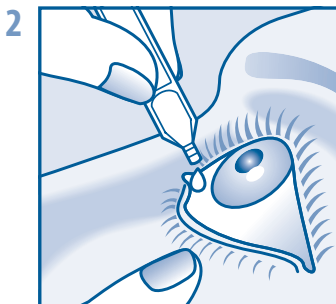

Instiller la solution sans toucher la surface de l'œil.

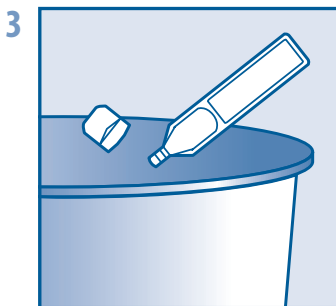

Ne pas réutiliser !



**Caractéristiques et mode d'action :** HYLOVIS® contient d'hyaluronate de sodium, un polymère naturel également présent dans les structures de l'œil humain. Les caractéristiques physiques particulières d'hyaluronate de sodium confèrent à HYLOVIS® ses propriétés viscoélastiques et de rétention d'eau. HYLOVIS® forme ainsi un film protecteur stable à la surface de l'œil qui n'est que lentement éliminé par le battement des paupières. HYLOVIS® allie ainsi un soulagement durable à un confort maximal. HYLOVIS® est bien toléré grâce à sa composition unique.

**Conservation et élimination :** Conserver à une température inférieure à 30 °C dans un endroit sec, à l'abri de la lumière ! Ne pas congeler ! Ne pas utiliser HYLOVIS® après la date d'expiration indiquée sur le récipient et le carton d'emballage. Conserver hors de portée des enfants ! Éliminer conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.

**Présentation :** 20 récipients unidoses de 0,3 ml.

**HYLOVIS® est un dispositif médical destiné à être utilisé par les patients.**

Date de la dernière révision : 2025-10



Numéro de lot



Date de fabrication



Date de péremption



Fabricant



Numéro d'identification unique du dispositif



Consulter le mode d'emploi



Stérilisé par procédé aseptique



Limite de température



Conserver à l'abri de la lumière



Dispositif médical

**Distributeur :**  
**TRB CHEMEDICA SAS**

ArchParc, ActiTech 4  
60 Avenue Marie Curie  
CS 40218  
74160 Archamps, France  
Tél. : +33 (0) 4 50 95 09 00  
[www.trbchemedica.fr](http://www.trbchemedica.fr)  
Code ACL : 4028694001406



**TRB CHEMEDICA AG**  
Otto-Lilienthal-Ring 26  
85622 Feldkirchen (Munich)  
Allemagne  
Tél. +49 (0)89 46 14 83-0



120336/1  
S/10.25